

دستورالعمل های تست آنتی ژن سریع خانگی

Artron

قبل از شروع

- این کیت تست را در دمای اتاق یا در هر مکانی با دمای بین 2 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری کنید (در فریزر نگهداری نکنید و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید؛ کیت را داخل خودرو نگذارید).
- سطحی صاف و تمیز (بدون مواد غذایی، نوشیدنی و آشغال) پیدا کنید که در صورت ریختن مایع به راحتی تمیز شود.
- در طول تست، از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، سیگار الکترونیکی (ویپ) کشیدن، استفاده از کنتاکت لنز، آرایش کردن و دست زدن به صورت خودداری کنید.
- این تست جهت خودآزمایی استفاده می شود.
- در صورت داشتن خونریزی بینی از این تست استفاده نکنید.

منابع

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تست سریع، نسخه های ترجمه شده این راهنما و ویدیوهای نحوه انجام تست، از کد QR زیر استفاده کنید یا به آدرس زیر مراجعه کنید: bccdc.ca/covid19rapidtesting

français •

한국어 •

عربي •

فارسی •



繁體中文 •

简体中文 •

ਪੰਜਾਬੀ •

Việt Ngữ •

español •

ትግርኛ



درک صحت تست شما

غریبالگری سریع آنتی ژن صرفاً یک نتیجه آبی ارائه می دهد. نتیجه منفی تست تضمین کننده ناقل نبودن فرد نیست. اگر اخیراً در معرض COVID-19 قرار گرفته اید، امکان دارد بعداً که آنتی ژن کافی در بدن شما وجود داشته داشت تا توسط تست تشخیص داده شود، نتیجه تست شما مثبت شود.

تست های آنتی ژن سریع، آنتی ژن ها (پروتئین های) ویروس مسبب COVID-19 را شناسایی می کنند. 3 تا 7 روز بعد از ابتلا زمان می برد تا ویروس کافی برای تشخیص توسط تست وجود داشته باشد. اگر شخص مبتلا به COVID-19 خیلی زود بعد از ابتلا تست بدهد، نتیجه تست می تواند منفی باشد؛ به این حالت منفی کاذب می گویند.


دستورالعمل ها

- 1 بینی خود را پاک کرده و دستمال را دور بیندازید. دست های خود را با صابون بشویید.
- 2 وسایل تست را آماده کنید:
 - کیت تست Artron:
 - یک عدد دستگاه تست
 - یک عدد سواب استریل
 - یک عدد لوله آزمایش (در بسته محتوی مایع)
 - یک عدد درپوش لوله آزمایش
 - یک عدد جای لوله آزمایش (در صورتیکه ارائه شده باشد)



- تایمر
- سطل زباله
- لیوان یا فنجان کوچک (اختیاری)

کیت تست Artron شامل این موارد است:

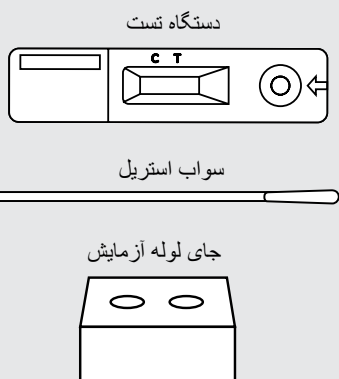

لیوان یا فنجان کوچک (اختیاری)




سطل زباله



تایمر



دستورالعمل های تست آنتی ژن سریع خانگی

Artron

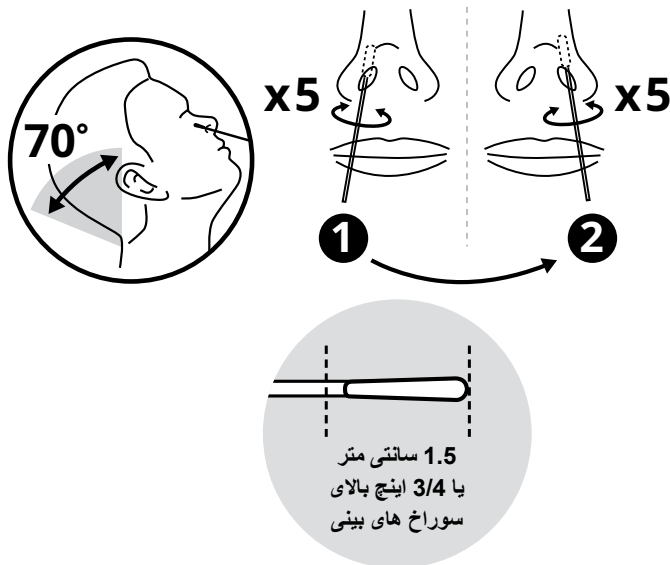

- 1 سواب را از بسته بندی خارج کنید. فقط دسته پلاستیکی را لمس کنید.
 - 2 سر خود را به عقب خم کنید.
 - 3 انتهای قسمت پنبه ای سواب را مستقیماً به پشت (نه به سمت بالا) یک سوراخ بینی به میزان 1.5 سانتی متر (3/4 اینچ) وارد کنید.
 - 4 برای نمونه گیری از مایع داخل بینی، سواب را در قسمت داخلی بینی خود قرار دهید.
 - 5 با ملایمت و به آهستگی 5 بار بچرخانید. این کار را در سوراخ دیگر بینی خود با همان سواب تکرار کنید.
- در صورت وجود خون، از سواب برای انجام تست استفاده نکنید. بینی خود را پاک کنید و یک سواب جدید استفاده کنید. در صورتیکه خونریزی بینی دارید، قبل از انجام تست 24 ساعت صبر کنید.

6 انتهای قسمت پنبه ای سواب را به آرامی داخل لوله آزمایش قرار دهید:

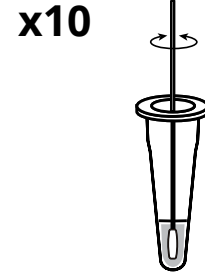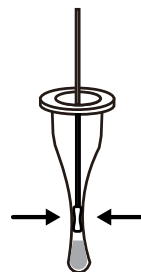

3 درپوش را محکم روی لوله آزمایش فشار دهید تا بسته شود.


2 در حالیکه طرفین لوله را به داخل فشار می دهید تا تمام مایع از سواب خارج شود، سواب را بردارید. سواب را در سطل زباله بیندازید.

1 نوک سواب را با ملایمت و به آهستگی 10 بار در مایع بافر بچرخانید.


دستورالعمل های تست آنتی ژن سریع خانگی

Artron

7 یک دستگاه تست را باز کرده و روی یک سطح صاف (مانند میز) قرار دهید.

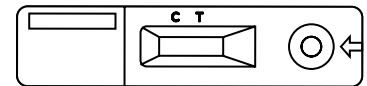


8 لوله را مستقیماً روی دستگاه تست بگیرید، بطوریکه درپوش مستقیم به سمت پایین اشاره کند. 4 قطره را به آرامی در دایره روی دستگاه تست بچکانید.

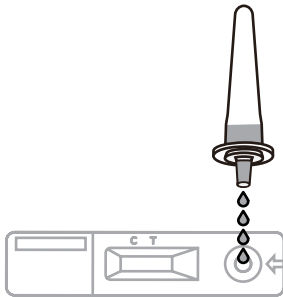


اجازه ندهید لوله آزمایش دایره را لمس کند.

9 تایمر را بر روی 30 دقیقه تنظیم کنید و بعد نتایج خود را چک کنید. در طول این مدت دستگاه تست را حرکت ندهید. خواندن نتیجه آزمایش بعد از 30 دقیقه ممکن است دقیق نباشد.

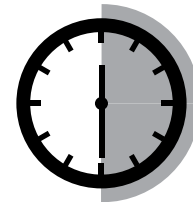

10 تمام وسایل تست را داخل سطل زباله بیندازید.

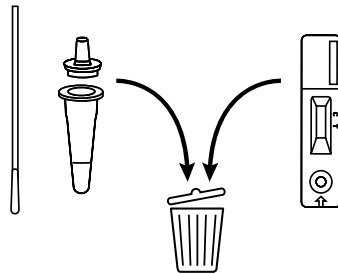

11 دست هایتان را بشویید.




نحوه خواندن نتایج تست

مهم نیست که کدام خط اول ظاهر شده یا خطوط چقدر کم رنگ به نظر می رسند. خطوط صورتی یا بنفش خواهند بود. دستگاه تست را بعد از تنظیم تایمر تحت نظر داشته باشید. آماده شدن نتیجه تست می تواند تا 30 دقیقه طول بکشد. امکان دارد نتایج مثبت زودتر پدیدار شوند.

صرف نظر از مثبت یا منفی بودن نتیجه تست، اگر احساس می کنید به مراقبت های پزشکی نیاز دارید، در پی دریافت آن باشید.

نتیجه منفی


فقط خط کنترل (C) نشان داده می شود

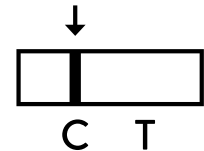

اگر نتیجه تست شما منفی بود، به این معنی است که COVID-19 تشخیص داده نشده است. با این وجود هنوز هم احتمال دارد که مبتلا به COVID-19 باشید.

نتیجه نامعتبر

فقط خط کنترل (C) نشان داده می شود

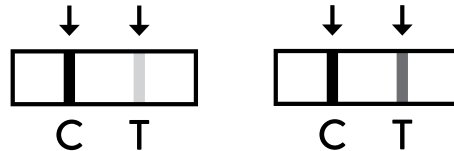


نتیجه مثبت به این معنی است که شما احتمالاً به COVID-19 مبتلا هستید و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنید.

برای اینکه ببینید آیا می توانید از درمان استفاده کنید یا خیر به وبسایت gov.bc.ca/covidtreatments مراجعه کرده یا با شماره تلفن 1-888-268-4319 تماس بگیرید

نتیجه نامعتبر

فقط خط کنترل (C) نشان داده می شود

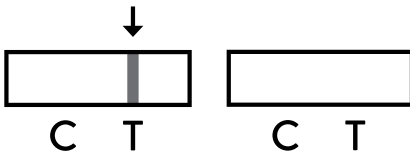

اگر تست شما نامعتبر است، تمام قطعات تست اول را دور بیندازید. دست های خود را بشویید و با استفاده از دومین مجموعه از قطعات تست، این روند را تکرار کنید. دستورالعمل های تست را مجدداً دنبال کنید.