


Перед началом тестирования

- Храните набор для теста при комнатной температуре или от +2°C до +30°C (не в холодильнике, берегите от воздействия солнечных лучей, не оставляйте в автомобиле).
- Подготовьте плоскую поверхность (свободную от пищевых продуктов, напитков и прочего), которую будет легко очистить в случае протечки.
- В ходе теста не принимайте пищу, не пейте, не курите, не надевайте контактные линзы, не накладывайте косметику и не трогайте лицо.
- Набор предназначен для самотестирования.
- Не проводите тест при носовом кровотечении.

Дополнительная информация

Для получения сведений о тестировании, переводах данной инструкции на другие языки и видео о том, как проводить данный тест, используйте этот QR-код или посетите: bccdc.ca/covid19rapidtesting

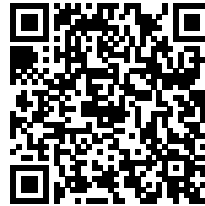

- 繁體中文
- 简体中文
- ਪੰਜਾਬੀ
- Việt Ngữ
- español
- ትግርኛ
- français
- 한국어
- عربي
- فارسی
-

Точность результатов теста

Экспресс-тесты на антитела выявляют антитела (белки) вируса, который вызывает COVID-19. После заражения может потребоваться **от 3 до 7 дней**, чтобы в организме накопилось достаточно вируса для выявления тестом. Если зараженный тестируется слишком рано, результат может быть ложно отрицательным.

Экспресс-тест на антитела действителен только на определенный момент. Негативный результат не гарантирует, что тестируемый не может быть заразным. Если вы подверглись воздействию COVID-19 недавно, тест в будущем может дать положительный результат при накоплении антител.

Инструкции

- 1** Высырнитесь и выбросьте салфетку. Вымойте руки с мылом.



- 2** Подготовьте:


- Набор Artron:
 - 1 контрольный прибор
 - 1 стерильный тампон
 - 1 контрольная пробирка (запаенная с жидкостью)
 - 1 крышка для пробирки
 - 1 стойка для контрольной пробирки (если прилагается)

- таймер
- мусорный бак
- стакан или чашка (по выбору)


Набор Artron включает:




Контрольный прибор

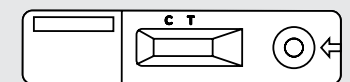

Стерильный тампон

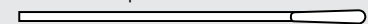

Стойка для контрольной пробирки

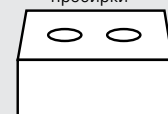

Таймер



Мусорный бак



Стакан или чашка (по выбору)

COVID-19


Инструкция по экспресс-тестированию на антитела в домашних условиях

Artron




BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

- 3** Распечатайте контрольную пробирку.

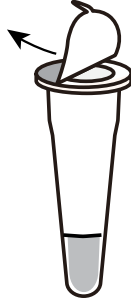


- 4** Поставьте заполненную контрольную пробирку в собранную стойку или чистый стакан/чашку.

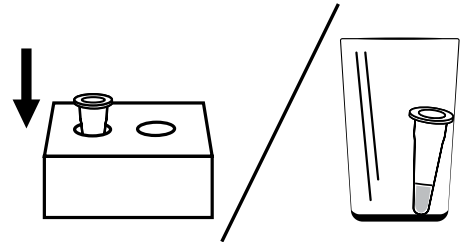


- 5** Возьмите мазок из носа:

- 1 Распакуйте тампон. Трогайте только ручку из пластика.
- 2 Отклоните голову назад.
- 3 Введите тампон прямо внутрь (не вверх) одной ноздри на 1,5 см (¾ дюйма).
- 4 Уприте тампон во внутреннюю стенку носа. Осторожно поверните его 5 раз.
- 5 Повторите все это в другой ноздре тем же тампоном.


Не используйте тампон если заметите на нем кровь. Высморкайтесь и возьмите новый тампон. Если у вас было носовое кровотечение, выждите 24 часа до проведения теста.

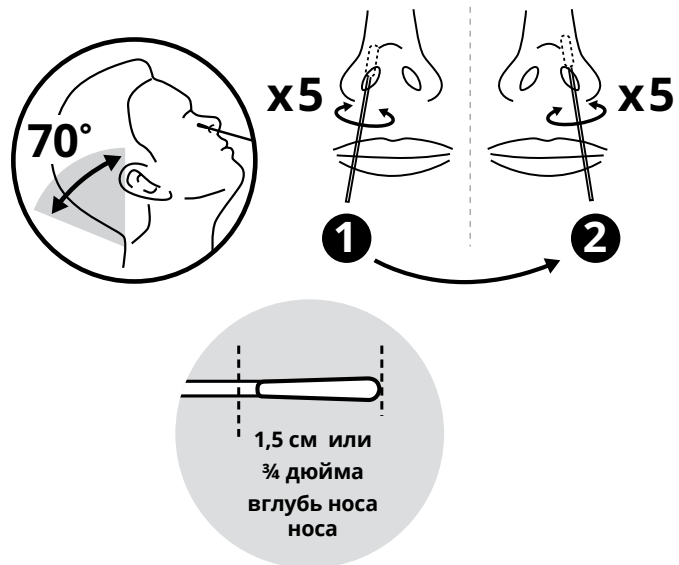

- 6** Осторожно введите конец тампона в контрольную пробирку:

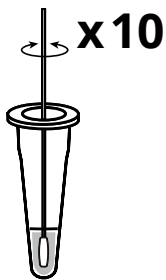

- 1** **Осторожно и не спеша** поверните тампон в жидкости 10 раз.

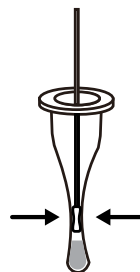

- 2** Вытащите тампон, сжимая пробирку, чтобы выдавить из него остатки жидкости. Выбросьте тампон в мусорный бак.



- 3** Плотнo закройте пробирку крышкой.

COVID-19


Инструкция по экспресс-тестированию на антитела в домашних условиях

Artron




BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

- 7** Поставьте контрольный прибор на плоскую поверхность (стол и т.п.).

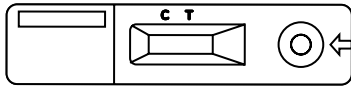


- 8** Держа пробирку крышкой вниз над контрольным прибором, не спеша выдавите 4 капли на кружок.


Не касайтесь пробиркой кружка.

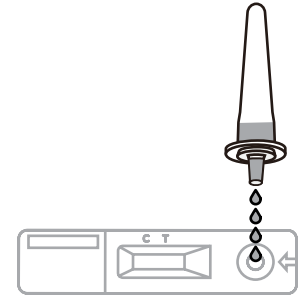


- 9** Для получения результата поставьте таймер на 30 минут. В течение этого времени не передвигайте контрольный прибор. Показатели по прошествии 30 минут могут быть неточными.

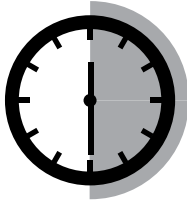

- 10** Выбросьте весь тестовый набор в мусорный бак.

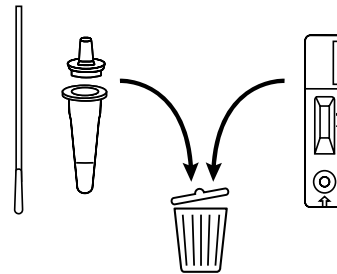

- 11** Вымойте руки.

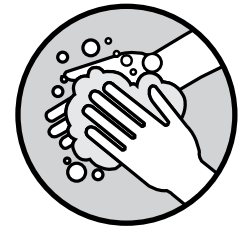


Как считывать результаты

Неважно, какая из линий появится первой и насколько они бледные. Линии будут розового или лилового цвета. Следите за прибором после установки таймера. Результат будет через примерно 30 минут. Положительный может появиться быстрее.

Вне зависимости от результата обратитесь за медицинской помощью если считаете, что она вам нужна.

Отрицательный результат


Появилась только контрольная линия (C)

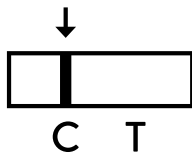

Если результат отрицательный, это означает, что COVID-19 не обнаружен. Однако возможно, что у вас все же есть COVID-19.

Положительный результат

Появились контрольная линия (C) и тестовая линия (T)

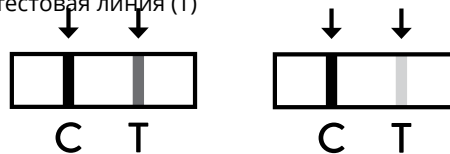


Положительный результат означает, что вы, вероятно, заражены COVID-19 и можете передать его окружающим.

Выясните, нужна ли вам помощь, на сайте gov.bc.ca/covidtreatments или по телефону 1-888-268-4319

Недействительный результат

Контрольная линия (C) НЕ появилась

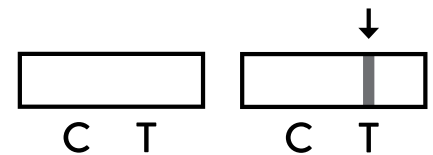

Если ваш результат недействителен, выбросьте весь тестовый набор. Вымойте руки и повторите тест с новым набором. Выполняйте все инструкции, приведенные выше.