

COVID-19 快速抗原居家检测说明

BD Veritor™


开始检测前


- 将此检测试剂盒保存在室温或2°C - 30°C之间的任何温度下(不要放在冷冻室内, 避免阳光直射; 不要放置于车内)。
- 找一个干净平整的表面, 上面不要有食物、饮料和杂物, 万一发生溢出时, 便于清洗。
- 在检测过程中, 不要进食、喝水、抽烟、吸电子烟、佩戴隐形眼镜、进行化妆或摸脸。
- 此检测用于自测。
- 如果在流鼻血, 则不要使用此检测。

资源

有关快速检测的进一步信息、本指南的翻译版本以及检测操作的视频, 请使用下面的二维码或访问:

bccdc.ca/covid19rapidtesting

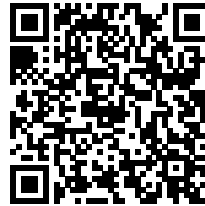

- 繁體中文
- 简体中文
- ਪੰਜਾਬੀ
- Việt Ngữ
- español
- ትግርኛ
- français
- 한국어
- عربي
- فارسی
- 

了解检测的准确性

BD Veritor™快速抗原检测可在**感染后3-5天**检测出COVID-19 阳性结果。当感染的时间不够长时(不到3天), 被感染者可能出现阴性结果。在这种情况下, 没有足够的抗原被快速检测试剂检测出来。

快速抗原筛查只提供某个时间点的结果。阴性结果并不保证一个人没有传染性。如果您最近接触了COVID-19, 只要此后体内有足够的抗原可被试剂检测出来, 就仍可能检测出阳性。

说明

- 1** 擤清鼻涕, 丢掉纸巾。用肥皂洗净双手。




- 2** 准备好检测器具:

- BD Veritor™检测试剂盒:
 - 1个检测装置
 - 1个无菌棉签
 - 1个装有液体的黄盖试管
 - 1个试管架

- 计时器
- 垃圾桶
- 小玻璃杯或杯子(可选)

BD Veritor™
检测试剂盒内含:

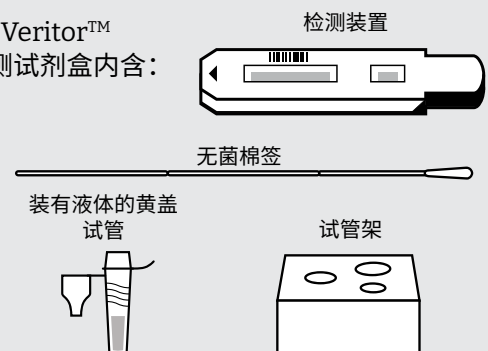

计时器



垃圾桶




玻璃杯或杯子
(可选)


COVID-19 快速抗原居家检测说明

BD Veritor™

- 3** 小心地打开黄盖
试管。


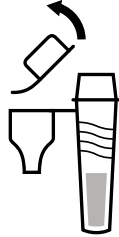


- 4** 将装有液体的试管放入组装好的
试管架或干净的玻璃杯或杯子中。

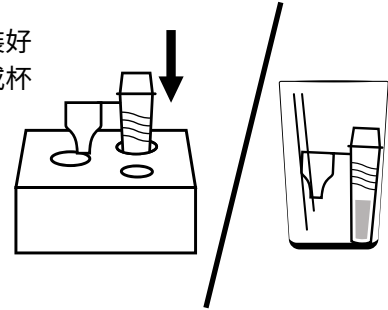

- 5** 采集鼻腔样本：


- 1 去掉棉签的包装。只接触塑料柄。
- 2 将头向后倾斜。
- 3 将棉签的棉端向一个鼻孔里直插入(不要朝上)2.5厘米(1英寸)。
- 4 将棉签贴在鼻子内腔。轻轻转动5次。
- 5 用同一根棉签在另一个鼻孔里重复上述动作。
- 6 如果棉签上有血迹,不要用它做检测。擤清鼻涕后,用一根新棉签。如果您流过鼻血,则等24小时后再检测。

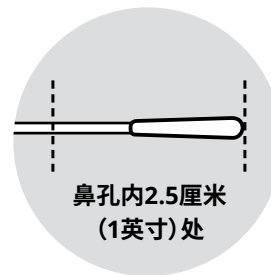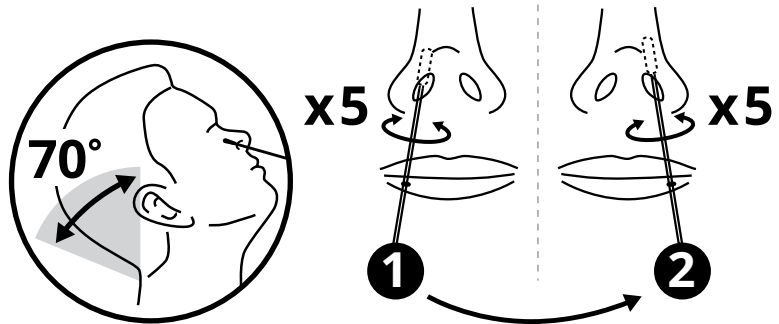

COVID-19 快速抗原居家检测说明


BD Veritor™

6 将棉签的棉端轻轻插入试管：

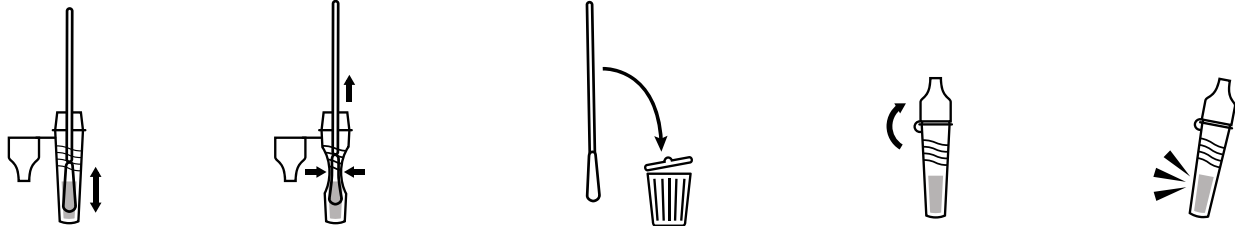


- 1 将棉签浸入液体中上下晃动**15秒**。
- 2 将棉签放在试管里，用手指捏住**试管外壁**，挤出棉签端的剩余液体
- 3 从试管中取出棉签并放入垃圾桶。
- 4 将连在试管上的塑料盖牢牢盖在试管上。您应该会听到轻轻的**咔嚓声**。
- 5 轻轻敲几下试管的侧面，以便混合溶液。


7 打开检测装置，将其置于平整的表面（如桌子）。

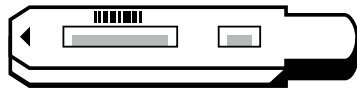


8 缓慢地将3滴液体挤到检测装置上的样本方格中。

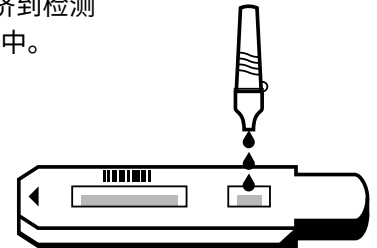


9 将定时器设为15分钟，等待结果。在这段时间里不要移动检测装置。超过20分钟后的读数可能不准确。

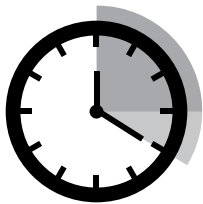

10 将所有检测用具放入垃圾桶。

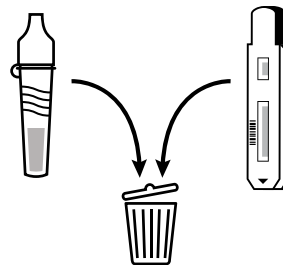

11 洗手。

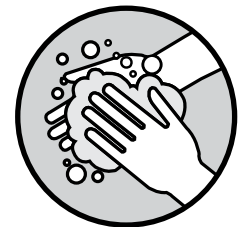

COVID-19 快速抗原居家检测说明

BD Veritor™


如何解读检测结果

哪条线先出现或线条看起来有多模糊并不重要。线条将为粉红色或红色。

如果您觉得需要就医,则不管检测结果如何,都要去就医。

阴性结果

只出现对照线(C)

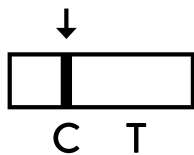


如果检测结果是这个样子,表示没有检测到COVID-19。但您仍有可能感染了COVID-19。

请自我隔离,直到症状改善,并且感觉身体已经可以恢复正常活动为止。如果公共卫生部门要求您自我隔离,请遵循他们的建议。

阳性结果

出现对照线(C)和检测线(T)

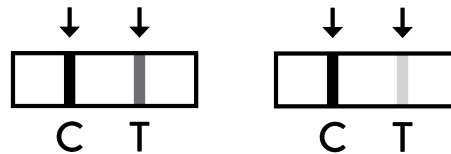

检测结果呈阳性,表示您很可能患有COVID-19,而且会传染给其他人。

要了解您是否可从治疗中受益,请访问: gov.bc.ca/covidtreatments 或致电: 1-888-268-4319


您需自我隔离。关于后续步骤的信息,请访问: bccdc.ca/ifyouhavecovid

无效结果


如果检测结果无效,请丢弃第一次检测的所有材料。洗手后,用第二套检测试剂盒重复检测过程。再次遵照检测说明进行操作。

如果两次检测的结果都是无效,请到COVID-19检测点接受检测。


查找检测点: healthlinkbc.ca/covid19test

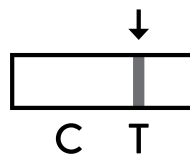


只有检测线

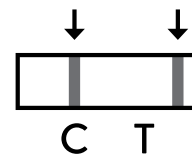


对照线和非特异性线

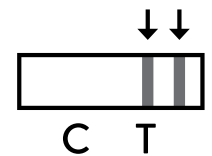


检测线和非特异性线

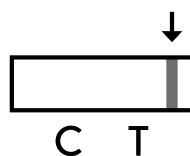

只有非特异性线

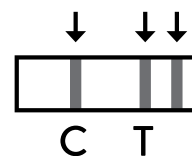

3条线

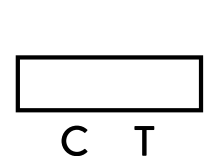

没有线