

الموارد

لمزيد من المعلومات حول الاختبار السريع، والإصدارات المترجمة من هذا الدليل، ومقاطع الفيديو حول كيفية إجراء الاختبار، استخدم رمز الاستجابة السريعة أدناه، أو قم بزيارة الموقع: bccdc.ca/covid19rapidtesting

français •

한국어 •

عربي •

فارسی •



繁體中文 •

简体中文 •

ਪੰਜਾਬੀ •

Việt Ngữ •

español •

ትግርኛ



قبل البدء

- احتفظ بطقم الاختبار هذا في درجة حرارة الغرفة، أو في أي مكان، بين 2 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية (لا تخزّنه في الفريزر «المجمد»، وأحفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة؛ ولا تتركه في السيارة).
- ابحث عن سطح مستوٍ نظيف (خالٍ من الطعام أو المشروبات أو المتعلقات) يسهل تنظيفه في حالة حدوث انسكاب.
- لا تأكل، أو تشرب، أو تدخن، أو تستنشق بخار النيكوتين (فيب)، أو تضع العدسات اللاصقة، أو تضع المكياج، أو تلمس وجهك أثناء الاختبار.
- هذا الاختبار تجريه بنفسك. لا يوصى إجراء هذا الاختبار مع الأطفال دون سن الخامسة.
- لا تجري هذا الاختبار إذا كان لديك نزيف في الأنف في آخر 24 ساعة.

التعرف على دقة الاختبار الذي تجريه

اختبار المستضد السريع يكشف المستضدات (البروتينات) للفيروس المسبب لكوفيد-19. قد يمر من 3 إلى 7 أيام بعد العدوى ليكون هناك ما يكفي من الفيروس لكي يكتشفه الاختبار. إذا كان الشخص مصاب بكوفيد-19 وأجرى الاختبار في زمن قليل بعد الإصابة، فإن نتيجة الاختبار قد تكون سلبية، وهذا يعني أن النتيجة سلبية زائفة.

يوفر اختبار المستضد السريع نتيجة تقتصر على زمن إجرائها فقط. النتيجة السلبية لا تضمن أن الفرد ليس مُعديًا. إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا لفيروس كورونا، قد تظهر نتيجة الاختبار إيجابية في وقت لاحق بمجرد وجود ما يكفي من المستضدات في أجهزة جسمك يكشفها الاختبار.

التعليمات:

تجميع أدوات الاختبار:

1. طقم اختبار SD Biosensor
- 1 عدد جهاز اختبار
- 1 عدد مسحة معقمة
- 1 عدد أنبوب اختبار (مغلقة بها سائل)
- 1 عدد غطاء لأنبوب الاختبار
- 1 عدد حامل أنبوب اختبار (حال تضمينه في العبوة)

1. نظّف أنفك بإخراج الزفير منه بقوة في منديل ثم تخلص منه. اغسل يديك بالصابون.



- مؤقت
- صفيحة قمامة
- كوب زجاج صغير أو فنجان (اختياري)


يتضمن طقم اختبار SD Biosensor ما يلي:



أنبوب اختبار


غطاء

جهاز الاختبار

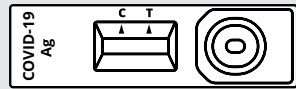

مسحة معقمة

حامل أنبوب الاختبار

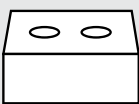



كوب زجاج أو فنجان (اختياري)




صفيحة قمامة




مؤقت

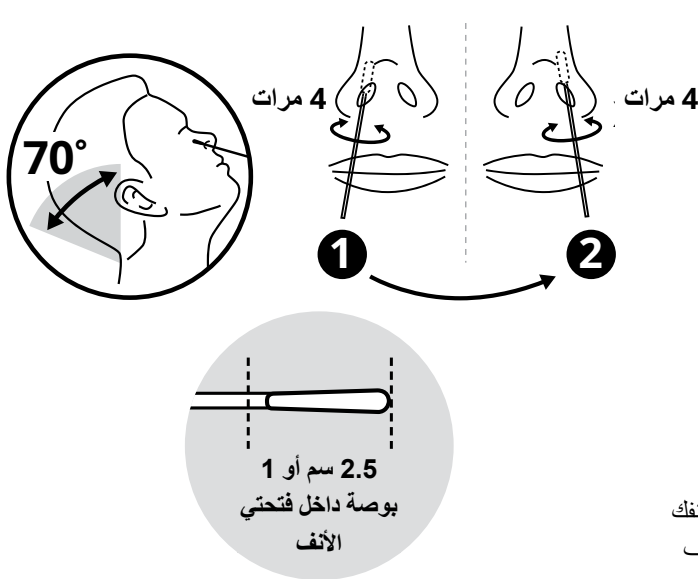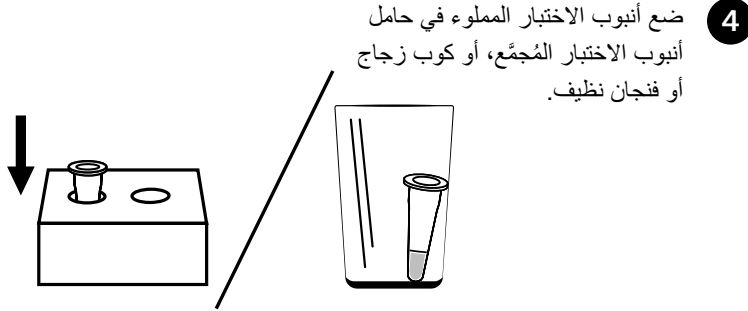


6 أدخل بلطف الطرف القطني من المسحة في أنبوب الاختبار:

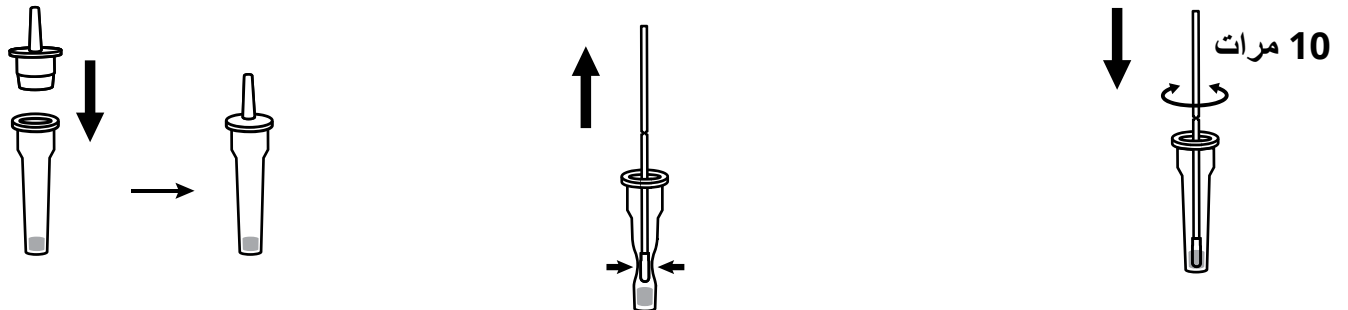


7 افتح جهاز الاختبار وضعه على سطح مستو (مثل الطاولة/المنضدة).

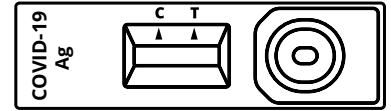


8 امسك الأنبوب وضعه مباشرة فوق جهاز الاختبار، مع الاحتفاظ بالغطاء موجه إلى أسفل بشكل مستقيم. اضغط ببطء لإخراج 4 قطرات على الدائرة الموجودة على جهاز الاختبار. لا تسمح لأنبوب الاختبار أن تلمس الدائرة.

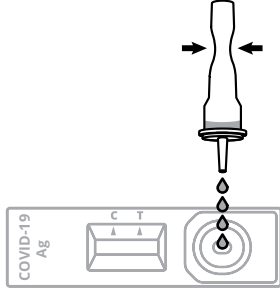

9 اضبط المؤقت على 15 دقيقة للحصول على النتيجة الخاصة بك. لا تحرك جهاز الاختبار أثناء هذا الوقت. القراءات بعد 30 دقيقة قد لا تتصف بالدقة.

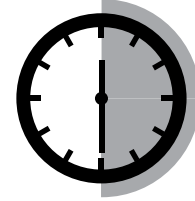

10 ضع كل أدوات الاختبار في القمامة.

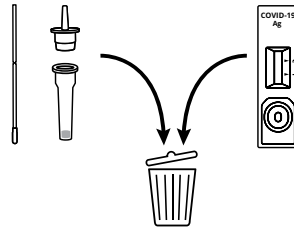

11 اغسل يديك.




كيفية قراءة نتائجك

لا يهم أي خط ظهر أولاً، أو أن تبدو الخطوط باهتة.

اطلب الرعاية الطبية إذا كنت تشعر أنك بحاجة إليها، بغض النظر عن نتائج الاختبار.

نتيجة سلبية

يظهر خط التحكم (C) فقط

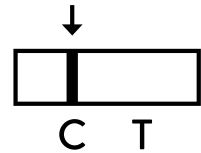


إذا كانت النتيجة سلبية، فهذا يعني أنه لم يتم اكتشاف فيروس كورونا. لا يزال من الممكن أن تكون مصاباً بفيروس كورونا.

اعزل نفسك حتى تتحسن أعراضك، وتشعر بصحة جيدة بما فيه الكفاية للعودة إلى الأنشطة العادية. إذا كنت قد تلقيت تعليمات بعزل نفسك من طرف هيئة الصحة العامة، يجب أن تستمر في عزل نفسك حتى إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

نتيجة إيجابية

يظهر خط التحكم (C) وخط الاختبار (T)

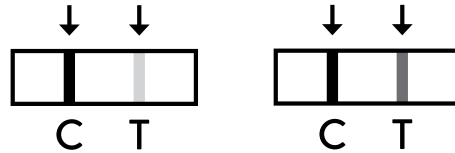


النتيجة الإيجابية تعني أنه من المحتمل أن يكون لديك فيروس كورونا ويمكنك نقله إلى الآخرين.

تحقق إذا كان بإمكانك الاستفادة من العلاج على موقع gov.bc.ca/covidtreatments أو اتصل على 1-888-268-4319

تحتاج أن تعزل نفسك. للمزيد من المعلومات عن الخطوات التالية، زر موقع bccdc.ca/ifyouhavecovid

نتيجة غير صالحة

خط التحكم (C) غير موجود

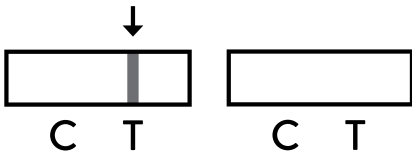

إذا كان الاختبار غير صالح، تخلص من كافة أدوات الاختبار الأول. اغسل يديك، وكّر العملية باستخدام المجموعة الثانية من أدوات الاختبار. اتبع إرشادات الاختبار مرة أخرى.

إذا كانت نتيجتي الاختبار غير صالحتين، توجه للاختبار لدى أي من أماكن اختبار كوفيد-19.

البحث عن مكان اختبار: healthlinkbc.ca/covid19test